



MEMO Timer

Gebrauchsanweisung

Artikel-Nr. 500150/500155/500160/500165

Rev B DE




Verwendungszweck

Der MEMO Timer verfügt über eine Säule aus Leuchtpunkten, mit denen das Verstreichen einer zuvor eingestellten Zeitspanne angezeigt wird (Rückwärtszählung). Wenn alle Leuchtpunkte erloschen sind, ist die Zeit abgelaufen und es wird ein Alarm ausgegeben.

Das Produkt ist für Personen vorgesehen, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Zeit und dem Verstreichen bestimmter Zeiträume benötigen. Das Produkt ist wasserdicht und für den Gebrauch in Innenräumen und im Freien vorgesehen.

Produktbeschreibung

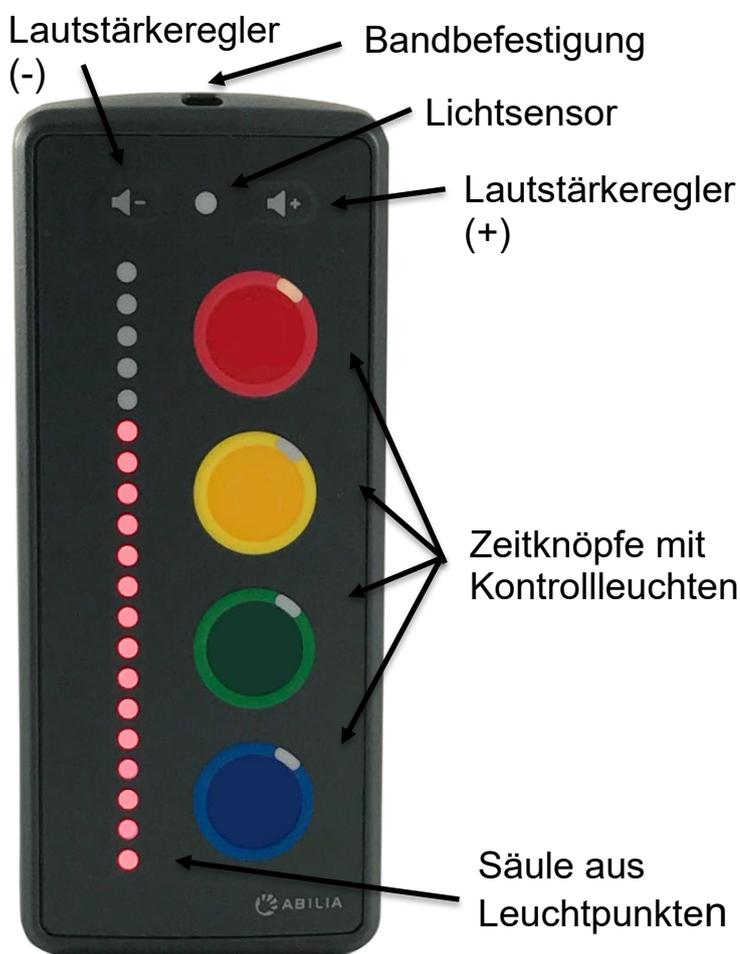

Die Zeitknöpfe auf den verschiedenen Produktmodellen entsprechen unterschiedlichen Zeiträumen in Minuten.


Zeitknöpfe	MEMO Timer			
	8	20	60	80
	2	5	15	20
	4	10	30	40
	6	15	45	60
	8	20	60	80

Der Lichtsensor passt die Helligkeit der Leuchtpunkte an die Umgebungshelligkeit an.

Durch die mitgelieferten Bänder kann der MEMO Timer z. B. an einem Haken oder in der Dusche aufgehängt oder um den Hals getragen werden.

Inbetriebnahme

Falls gewünscht, bringen Sie das ausgewählte Band an.
Legen Sie die Batterien gemäß Schritt 1–7 ein:

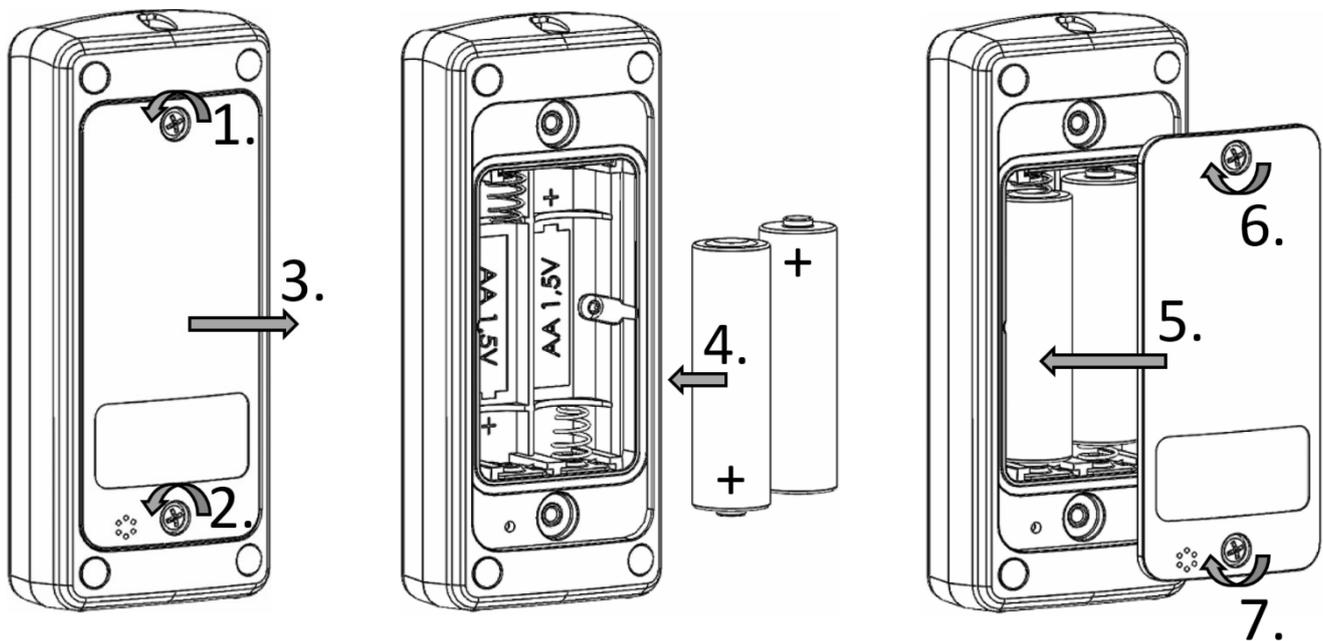

Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung der Batteriefachabdeckung keine Schäden oder Abrieb aufweist, bevor Sie diese wieder anbringen.

Weisen Sie den Anwender in den sicheren Gebrauch des Produkts ein.

Wartung und Reinigung

Wenn die Batterien schwach sind und ausgetauscht werden müssen, wird stündlich ein Signalton ausgegeben. Zum Austauschen der Batterien siehe Abschnitt *Inbetriebnahme*.

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn dieses über einen langen Zeitraum aufbewahrt wird.



Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch mit warmem Wasser und Seife.

Funktionen und Einstellungen

● = Angezeigte Zeitknöpfe gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

Die Standardeinstellungen sind in der Tabelle durch *kursiven Fettdruck* gekennzeichnet.

Funktion	Knöpfe	Information
Timer starten	Den Knopf für die gewünschte Zeitspanne drücken und loslassen.	Die entsprechende Anzahl an Leuchtpunkten leuchtet auf. Die Kontrollleuchte des ausgewählten Knopfes leuchtet auf (sofern entsprechend eingestellt). Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, wird der Alarm ausgelöst. Die Leuchten der Säule blinken auf und es wird ein Signalton bzw. Vibrationsalarm ausgegeben (je nach Einstellung).
Alarm beenden	Einen beliebigen Knopf drücken und loslassen.	
Rückwärtszählung abbrechen	● + ● 2 Sek.	Die Rückwärtszählung wird abgebrochen.
Alarmlautstärke einstellen	Den Plus- bzw. Minus-Knopf zur Lautstärkeregelung drücken, um die Alarmlautstärke zu erhöhen oder zu verringern.	Es gibt fünf Stufen: 1 = stumm, 5 = Max. (Standard = 3). Bei jeder Stufe wird zur Information ein entsprechender Signalton ausgegeben. Eine Vibration zeigt Stufe 1 und Stufe 5 an.

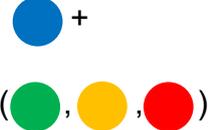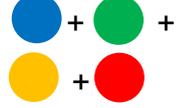Einstellung	Knöpfe	Information			
Alarm-Signalton ändern	 2 Sek.	Zur Änderung der Einstellungen den Plus- bzw. Minus-Knopf der Lautstärkeregelung drücken. Bei jeder Stufe wird zur Information ein entsprechender Signalton ausgegeben.	Alarm 1	Alarm 2	Alarm 3
Vibration	 2 Sek.	Zur Änderung der Einstellungen den Plus- bzw. Minus-Knopf der Lautstärkeregelung drücken.	Aus	Ein	Ein, lautlos
Knopf-Kontrollleuchten	 2 Sek.	Zur Änderung der Einstellungen den Plus- bzw. Minus-Knopf der Lautstärkeregelung drücken.	Aus	Ein	
Max. Helligkeit	 2 Sek.	Es gibt fünf Helligkeitsstufen: 1 = Min., 5 = Max. (Standard = 3). Zur Änderung der Einstellungen den Plus- bzw. Minus-Knopf der Lautstärkeregelung drücken. Bei jeder Stufe wird die zugehörige Helligkeit angezeigt.			
Einstellungsmodus beenden		Die Leuchtpunkte blinken 3-mal. Alternativ 10 Sekunden warten.			
Eingabesperre	 Siehe Hinweis*	Gesperrt = Leuchtpunkte der Säule blinken 1-mal. Nur die Aktionen „Timer starten“ und „Alarm beenden“ möglich. Entsperrt = Leuchtpunkte der Säule blinken 2-mal.			
Einstellungen zurücksetzen	 2 Sek.	Es erfolgt ein Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.			

* Den blauen Knopf drücken und gedrückt halten, dann der Reihenfolge nach den grünen, gelben und roten Knopf jeweils drücken und loslassen.

Lieferumfang

- 1 MEMO Timer
- 1 Umhängeband
- 1 kurzes Band
- 2 AA-Batterien 1,5 V

Technische Daten

Größe:	107 × 46 × 25 mm
Gewicht:	0,12 kg
Batterie:	2 × AA 1,5 V
Alarmlautstärke:	Max. 80 dB (1 Meter)
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-10 °C bis +40 °C

Recycling und Entsorgung



Elektronische Geräte und Batterien sind gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Zulassungsinformationen

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte sowie die Normen EN 12182-2012 und EN 14971.

Sicherheit und Haftung



Im Falle einer Verletzung oder eines Verletzungsrisikos wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Anbieter oder Abilia.

Das Produkt erfüllt hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität die Anforderungen der EU-Richtlinie über Medizinprodukte. Bei der Inbetriebnahme und der täglichen Verwendung ist stets auf den sicheren Gebrauch des Produkts zu achten. Bitte wenden Sie sich bei jeglichen Unklarheiten zur ordnungsgemäßen Verwendung und Inbetriebnahme an Ihren Anbieter.

Das Produkt darf nur für den im Abschnitt *Verwendungszweck* genannten Zweck und der darin beschriebenen Umgebung verwendet werden. Das Produkt darf nicht als alleiniges Hilfsmittel im Zusammenhang mit einer Medikation, medizinischen Behandlung oder anderen lebensnotwendigen Maßnahmen verwendet werden.

Warnung! Das Produkt darf nur bei Gebrauch des mitgelieferten Umhängebands mit Sicherheitsschnalle um den Hals getragen werden.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten und entsprechend angepassten Bänder, um ein Strangulationsrisiko und andere Verletzungen zu verhindern.

Batterien enthalten gesundheitsschädigende Stoffe. Außerhalb der Reichweite von Personen aufbewahren, die die Risiken nicht einschätzen können. Batterien nur dann wieder aufladen, wenn es sich um wiederaufladbare Akkus handelt. Batterien nicht in Feuer werfen.

Abilia haftet nicht für Schäden jeder Art, Folgeschäden oder Verluste infolge falscher Verwendung, mangelhafter Wartung und Pflege, unsachgemäßer Einstellungen oder Ähnlichem. Die finanzielle Haftung von Abilia ist in jedem Fall auf den Wert des Produkts selbst beschränkt.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den zukünftigen Gebrauch auf. Sie steht auch zum Abruf und Download auf www.abilia.com zur Verfügung.



CE